



tria.®

**ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ВОЛОС
HAIR REMOVAL LASER 4X**

Инструкция по эксплуатации

©Tria Beauty, Inc. <https://tria-beauty.ru>

ДИАГРАММА ТОНОВ КОЖИ

ПРОВЕРКА ТОНА ВАШЕЙ КОЖИ, чтобы выяснить, если вы можете безопасно использовать лазерное устройство для удаления волос TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X. Сравните вашу кожу на области, которую вы хотите обработать лазером с диапазоном тонов кожи, показанных на этой диаграмме. Если ваш тон кожи совпадает с любым из тонов кожи с надписью «НЕ БЕЗОПАСНО» для применения, то НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X.

БЕЗОПАСНО



НЕ БЕЗОПАСНО



ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА:

Ногах; Руках; Линии бикини; Подмышках;
Груди; спине; Животе; Женские Волосы на
лице (ниже линии щек)

ПРОЧИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед тем, как использовать новый TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X, прочитайте эту брошюру для получения важной информации:

- Убедитесь, что TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X безопасен для вас.
- Узнайте, как использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X.
- Посмотрите сроки и результаты применения.
- Прочитайте наши советы для достижения наилучших результатов.

Изучите противопоказания и предупреждения, это поможет вам избежать возможных рисков в отношении безопасности.

Обязательно прочитайте и соблюдайте все предупреждения и информацию по технике безопасности.

Мы рекомендуем вам сохранить эти инструкции для дальнейшего использования. Если у вас есть вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов. Вы также можете найти всю необходимую информацию в Кратком руководстве на нашем сайте (см задняя сторона обложки).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЫ ПРИОБРЕЛИ НОВЫЙ
TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X

ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС
Вы получите постоянный результат в домашних условиях,
в отличие от временных решений, таких как бритье и воск.

TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X

работает таким же образом, как и профессиональные лазерные устройства для удаления волос. Воздействует непосредственно на волосяной фолликул, а не только на волосы, что дает вам постоянное уменьшение роста волос уже после нескольких серии процедур.

ДАВАЙТЕ НАЧЕМ!

ВВЕДЕНИЕ

КАК РАБОТАЕТ ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X деактивирует фолликулы, находящиеся на вашей коже, внутри которых рождаются волосы. Лазер испускает импульс света, который нагревает темный пигмент внутри волоса и таким образом влияет на волосяной фолликул. Вот почему он может обеспечить постоянные результаты и работает только на естественно коричневых или черных волосах.

Для того, чтобы быть наиболее эффективным, лазерное устройство воздействует на каждый волосяной фолликул во время активной фазы роста волос. Волосы растут по циклам, так что необходимо несколько процедур. Для достижения наилучших результатов применяйте лазерное устройство каждые две недели в течение до 3-х месяцев или до получения удовлетворительных результатов сокращения волос.

ЗНАКОМСТВО С TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X

TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X

АПЛИКАТОР

Излучает лазерный свет во время применения

ДИСПЛЕЙ

Проведет вас через процедуру

ЗАРЯДКА

Подключите зарядное устройство в этот разъем




ДАТЧИК КОЖИ

Функция безопасности, которая разблокирует устройство

ОСНОВАНИЕ
ПРИБОРА

ДИСПЛЕЙ

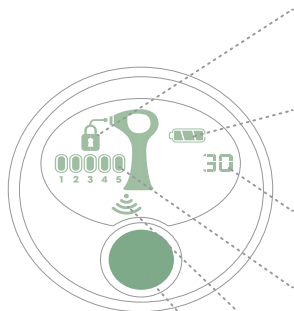

ЗАМОК

Устройство будет заблокировано, если оно не используется. Разблокировать его можно только с помощью датчика кожи.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ

Индикатор заряда батареи. Если он начнет мигать, значит, что батарея разряжена и нуждается в подзарядке.

СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ

Считает количество импульсов за процедуру.

УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ

Индивидуальная настройка уровня энергии.

ИНДИКАТОР ДАТЧИКА КОЖИ


Световой индикатор показывает, что датчик готов к использованию

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Включает/выключает устройство. А также служит для выбора уровня энергии.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Используется для зарядки прибора. Устройство не будет работать при подключенном к розетке зарядном устройстве.

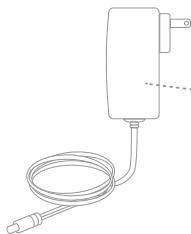

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X

TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X используется для удаления нежелательных волос. Это доступный прибор, предназначенный для использования на теле, как добавочная периодическая процедура удаления волос совместно с бритьем. Устройство

также предназначено для постоянного сокращения роста волос, которое определяется как долгосрочное, стабильное снижение роста новых волосков после завершения полного режима процедур до 6, 9 и 12 месяцев.

Он предназначен для использования только на светлых и средних тонах кожи (смотри таблицу) и на естественно коричневых или черных волосах. Устройство не работает на белых, седых, светлых или рыжих волосах.

КОМУ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X (ПРОТИВПОКАЗАНИЯ)

НЕ используйте устройство, если тон вашей кожи соответствует тону «НЕ БЕЗОПАСНО» на диаграмме тонов. Если вы будете использовать устройство, если тон вашей кожи считается "не безопасным" для применения, кожа может поглотить слишком много лазерного света и вы получите травму (ожог, обесцвечивание или шрамы). ВНИМАНИЕ: Датчик кожи является функцией безопасности, которая разблокирует устройство. Если тон вашей кожи не безопасен для использования TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X, вы не сможете разблокировать его с помощью датчика кожи.

НЕ использовать устройство TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X, если вы находитесь в возрасте до 18 лет и не применять устройство на лицах моложе 18 лет. Применение лазерного устройства на детях не изучено и может привести к серьезным травмам.

НЕ использовать устройство на белых, седых, светлых или рыжих волосах. Для того, чтобы лазерное устройство применялось должным образом, вы должны иметь естественно темные волосы на той области, где вы применяете лазер. Более светлые волосы содержат пигменты, которые не будут поглощать достаточно энергии лазера, чтобы деактивировать волосяной фолликул.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

НЕ использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X вокруг глаз, на бровях или ресницах. Это может нанести непоправимый вред зрению.

НЕ использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X, если тон вашей кожи соответствует тону на Диаграмме НЕ БЕЗОПАСНО, это показывает, что ваш тон кожи не подходит для применения лазера.

Если у вас есть африканские или индийские, корни, вы можете иметь тон кожи, который не подходит для применения лазерного устройства, не забудьте проверить тон вашей кожи и сравнить с Диаграммой. Темные тона кожи могут поглотить слишком много лазерного света, который может повредить кожу.

НЕ использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X в следующих местах: на ушах, сосках, гениталиях или вокруг ануса. Эти участки могут иметь более чувствительную кожу, более темный тон кожи, и / или больше плотность волос, а также может привести к серьезным травмам кожи.

НЕ использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X на частях тела, где ваша кожа темнее, чем ваш обычный тон кожи: татуировки, темно-коричневые или черные пятна (например, большие веснушки, родинки или родимые пятна) или где ваша кожа имеет покраснения или опухание от предыдущей обработки. Темная кожа может поглощать слишком много лазерного света, который может повредить кожу.

НЕ использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X на мужском лице, челюстях или шее. Волосы бороды человека слишком плотные, и использование TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X в этих областях может привести к травмам кожи.

Удаление волос с помощью лазера может вызвать увеличение роста волос у некоторых людей на лице. На основании имеющихся данных в настоящее время самые высокие группы риска это женщины Средиземноморья, Ближней Восточной и Южной Азии.

НЕ использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X на поврежденной коже, в том числе на местах, где есть открытые раны, герпес, загар или области, где вы применяли шлифовку кожи или процедуру пилинга в течение последних 6-8 недель (проконсультируйтесь с вашим врачом). Эти условия могут сделать кожу более восприимчивой к травмам.

НЕ использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X , если вы беременны или кормите грудью. TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X не был протестирован на беременных женщинах. Гормональные изменения могут повысить чувствительность кожи и повысить риск повреждения кожи.

НЕ использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X , если устройство повреждено, и не пытайтесь открыть или отремонтировать прибор. Эти действия повышают риск повреждения кожи или глаз. Пожалуйста свяжитесь со Службой поддержки клиентов для получения помощи.

Всегда соблюдайте основные правила техники безопасности для электрических устройств: НЕ использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X или зарядное устройство, если они влажные или мокрые. НЕ используйте устройство во время купания и не кладите его рядом с ванной или раковиной. НЕ использовать зарядное устройство с

поврежденной вилкой или шнуром. ВСЕГДА держите шнур вдали от нагретых поверхностей. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к поражению электрическим током.

НЕ использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X для любых других целей, кроме удаления волос.

Устройство предназначено только для личного использования и не предназначено для использования в медицинской клинике, салоне или иной коммерческой структуре.

НЕ использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X на той области, где вы когда-нибудь захотите, чтобы ваши волосы выросли снова. Результаты могут быть постоянными и необратимыми.

Невидимое лазерное излучение. Не смотрите на устройство непосредственно с помощью оптических инструментов. Выходная мощность лазера с некоторыми оптическими инструментами (например лупой, увеличительным стеклом, или микроскопом) на расстоянии 100 мм может представлять опасность для глаз.

Ни одна модификация этого оборудования не допускается.

Данное устройство использует радиочастотную энергию только для своих внутренних функций. Поэтому его радиочастотное излучение очень низкое, и, вероятно, не вызовет каких-либо помех в соседнем электронном оборудовании.

ПОЛЬЗА И РИСКИ

Проведенное под медицинским надзором клиническое исследование показало, что лазерное устройство TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X является безопасным и работает правильно, когда используется как указано в инструкции.

79 пользователей выполнили 6 недельный курс применения (3 процедуры), наблюдая эффекты. Количество волос подсчитывалось перед каждым применением устройства и через 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев после того, как была проведена последняя процедура. Никаких дополнительных процедур проведено не было после третьей обработки.

ПОЛЬЗА

При использовании устройства по назначению, вы получаете постоянные результаты. Результаты варьируются от человека к человеку и зависят от того, какой участок тела обрабатывается, и как близко к инструкции вы следуете. Клинические исследования показали следующие преимущества:

- 61% среднее снижение волос через 3 недели после первой обработки
- 70% среднее снижение волос через 3 недели после второй обработки
- 60% среднее снижение волос через 1 месяц после третьей обработки
- 33% среднее снижение волос через 12 месяцев после третьей обработки

В исследовании, 69 из 79 пользователей (87%) сообщили, что волосы стали тоньше через 1 месяц после последней обработки, чем до процедуры. И 55 из 79 пользователей (70%) сообщили, что волосы стали светлее через 1 месяц после последнего применения, чем до процедуры. Эти результаты были получены только с 3 обработок.

Для достижения наилучших результатов применяйте устройство через каждые 2 недели в течение 3-х месяцев или до тех пор, пока вы не будете удовлетворены количеством сокращенных волос.

РИСКИ

Важно использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X должным образом. Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете все предупреждения, описанные в данной брошюре. Датчик кожи предотвратит использование устройства на противопоказанном типе кожи.

Если вы используете TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X в соответствии с указаниями, риски являются низкими:

- В клиническом исследовании почти все пользователи сообщили, что испытывали от легкой до умеренной боли и дискомфорт во время первого применения лазера, со снижением чувствительности при последующих обработках. Это нормально. Вы можете почувствовать тепло, жжение, покалывание или зуд; некоторые пользователи описывали чувство такого же уровня дискомфорта, как, если бы резиновая лента щелкала по коже. Если боль слишком интенсивная или сохраняется после того, как вы прекратили использование TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X, проконсультируйтесь с вашим врачом, прежде чем использовать его снова.

- Ваша кожа может стать красной сразу после процедуры или в течение 24 часов. Это покраснение кожи в целом исчезает в течение нескольких часов. Обратитесь к врачу, если покраснение не уходит в течение 2-3 дней.

- В редких случаях некоторые пользователи могут увидеть увеличение количества волос в обрабатываемой области после первоначального применения устройства. Если этот рост продолжается в течение нескольких процедур, прекратите использование TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X и обратитесь к врачу.

Следующие симптомы не были выявлены в клиническом исследовании (0 из 88), но было обнаружено с другими лазерами для удаления волос:

- Отек кожи, особенно вокруг волосяного фолликула. Если опухоль не исчезает в течение 2-3 дней, прекратите использование TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X и обратитесь к врачу.

- Временное или постоянное обесцвечивание кожи. Если цвет кожи меняется, прекратите

- Волдыри. Это очень маловероятно для людей со светлым или средним тоном кожи. Если действительно развиваются волдыри, прекратите использование TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X проконсультируйтесь с Вашим врачом, если это необходимо.

ПРОЦЕДУРЫ С ЛАЗЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ ОБЗОР

Перед первым ПРИМЕНЕНИЕМ

- За 6 недель до процедур прекратите депиляцию или выщипывание волос.
- По крайней мере за 1 день до начала процедур, выполнить тест на вашей коже.

ПЕРЕД КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРОЙ

- Зарядите устройство.
- Отключите его от зарядного устройства.
- Очистите, побрить и высушить кожу.
- Включите устройство.
- Разблокируйте его с помощью датчика кожи.
- Установите уровень обработки.

МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ

- рекомендуем брить отросшие волосы, но не пользоваться воском или срывать волосы.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ УВИДИТЕ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Будьте последовательны и следуйте инструкциям по применению лазера.
- Для достижения наилучших результатов используйте устройство каждые две недели до 3 месяцев или до тех пор, пока не увидите желаемых результатов.

ЧТО ОЖИДАТЬ

во время использования TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X

- Ощущение меняется, в зависимости от человека, области применения устройства и уровня энергии. Некоторые пользователи могут почувствовать ощущение покалывания. Другие будут чувствовать себя тепло.
- По мере уменьшения количества волос на обработанных участках уменьшается и ощущение дискомфорта также будет уменьшаться. По этой причине, вы можете быть в состоянии использовать более высокий уровень энергии после вашего первоначального применения.
- Некоторые пользователи испытывают легкое покраснение, которое проходит в течение 24 часов.


В течение первых 3-х МЕСЯЦЕВ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРА

- После первого ПРИМЕНЕНИЯ, не будет никаких видимых изменений волос. Лазерная эпиляция не вызывает немедленное выпадение волос.
 - С помощью дополнительных обработок, будет уменьшение в количестве волос после каждой обработки.
 - Волосы, которые будут отрастать вновь, становятся осветленными и становятся тоньше.
- После 3-х месяцев применения
- Волосы, которые были деактивированы лазерным устройством, не будут расти обратно.
 - Используйте дополнительные процедуры, если это необходимо.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Зарядите устройство.

Заряжайте TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X в течение по крайней мере 2-х часов прежде, чем использовать его в любое время, или если индикатор батареи "пустой" и мигает. Если вы охватываете большую область или используете устройство на высоком уровне энергии, вам может понадобиться подзарядка в середине процедуры. Это нормально.

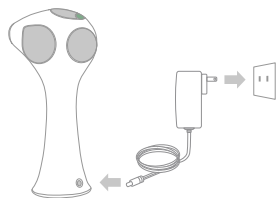

КАК ЗАРЯЖАТЬ:

1. Вставьте зарядное устройство в разъем зарядного гнезда и в розетку.
2. Индикатор батареи покажет его «наполнение» во время зарядки лазерного устройства.
3. После полной зарядки индикатор батареи остановится, и вы можете отключить зарядное устройство. Устройство может быть подключенным к розетке в течение длительных периодов времени без повреждений.

Примечание: Для предотвращения повреждения прибора, используйте только входящее в комплект поставки зарядное устройство Tria. Если вы потеряли зарядное устройство, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Примечание: Вы можете зарядить лазер в тихом режиме (без звука охлаждающего вентилятора), но это займет больше времени. Для смены режима зарядки, нажмите кнопку питания во время зарядки.

ТЕСТИРОВАНИЕ ЛАЗЕРА НА КОЖЕ

До вашего первого применения лазерного устройства на новой области вашего тела, мы рекомендуем вам попробовать различные энергетические уровни на участке кожи там, где не заметно.

1. Подготовьте кожу и разблокируйте TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X . Устройство будет установлено на 1-м уровне (низкий).

2. Поместите аппликатор горизонтально вашей коже, и сделайте один тестовый лазерный импульс.

3. Если уровень 1 был приемлемым для вас, перейдите к до 2-го уровня, вновь сделайте тестирование на этом уровне с одним лазерным импульсом. Для регулировки уровней вверх или вниз, нажмите Кнопку питания .

4. Если уровень 2 был приемлемым для вас, поменяйте место и вновь увеличьте энергию на один уровень, пока вы не найдете самую высокую настройку, которая по-прежнему терпима для вас. Применение лазера на самом высоком уровне поможет достичь максимальных результатов быстро и эффективно.

5. Подождите 24 часа, а затем изучите тестовые зоны. Если кожа кажется нормальной, начните первую обработку, используя самый высокий уровень, который вы нашли комфортным для себя. Протестируйте вашу кожу, если изменяется тон вашей кожи резко (из-за дубления) или если вы заметили, вздутия, ожоги, другие изменения или любые другие побочные эффекты, или если вы не уверены в результатах теста, не используйте свой TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X . Свяжитесь со службой поддержки клиентов.

ПЕРЕД КАЖДЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

Подготовьте кожу

1. Очистите область обработки, удалите все косметические средства, лосьоны и кремы, которые могут блокировать лазерный луч.

2. Побрите область обработки. Удаление с поверхности волос улучшает комфорт и позволяет свету лучше достичь волосы в луковице.

3. Высушите зону обработки.


РАЗБЛОКИРОВКА ЛАЗЕРНОГО УСТРОЙСТВА

TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X будет заблокирован, когда он не используется.

Для того, чтобы разблокировать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X используйте датчик кожи, который поможет подтвердить, что лазерное устройство является безопасным для вашего тона кожи.

1. Отключите зарядное устройство от TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X и нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор. На дисплее появится замок и индикатор датчика кожи.

2. Приложите датчик кожи (красный свет у основания TRIA LASER 4X) к коже в области, которую Вы хотите обработать. Датчик кожи автоматически почувствует и проверит вашу кожу. Если устройство безопасно для вашего тона кожи, то прибор начнет испускать серию звуковых сигналов и разблокируется.

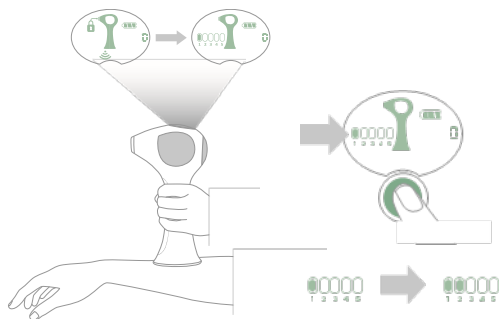

3. Если значок замка все еще виден, и вы не слышите серию звуковых сигналов, то это не может быть безопасным для вас, чтобы использовать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X. Или, возможно, что с помощью датчика тон кожи установлен неправильно - нужно попробовать еще раз. Чтобы попробовать еще раз, поднимите устройство и повторите шаги, описанные выше. Если вы все еще не можете разблокировать TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки клиентов для получения помощи.

УСТАНОВКА УРОВНЯ ЭНЕРГИИ

TRIA LASER 4X имеет разные уровни энергии. В клиническом исследовании более высокие уровни были найдены в 2-3 раза эффективнее. Таким образом, для достижения наилучших результатов, мы рекомендуем использовать максимально возможные настройки, которые вы смогли бы комфортно перенести.

Когда устройство включено и разблокировано, нажмите кнопку питания, чтобы выбрать желаемый уровень.

При каждом нажатии на кнопку питания, уровень будет увеличиваться. После того, как индикатор уровня установится на максимальном уровне энергии, повторное нажатие на кнопку питания вернет его до самого низкого уровня.

КАК ПРИМЕНЯТЬ

1. включить лазер, разблокируйте его и установите необходимый УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ.




2. Приложите и удерживайте аппликатор на коже, пока не услышите два звуковых сигнала.

- Если вы не слышите звуковые сигналы, убедитесь, что аппликатор расположен горизонтально вашей коже.

Лазер будет испускать импульсы, когда все окно плотно соприкасается с вашей кожей.


- Если вы услышите гудящий тон вместо второго Звукового сигнала, это означает, что вы подняли устройство от кожи до того, как импульс был закончен.

- Не перемещайте окно обработки между первым и вторым сигналом, так как это нарушит лазерный импульс и снизит его эффективность.

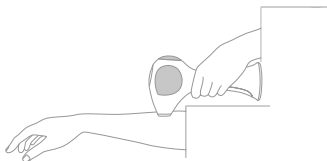

3. Приподнимите лазер и поместить его обратно на коже так, чтобы он перекрывал предыдущее пятно.

- Каждый раз, когда вы перемещаете аппликатор, перемещайте его примерно на половину расстояния окна (Около 1/4 дюйма или 5 мм). Это создаст обработку кожи внахлест, что будет гарантировать, что вы покрыли все волосяные фолликулы на выбранной области. Получается около 25 лазерных импульсов на квадратный дюйм или 40 импульсов на 10 см. Кв Не применять повторно на одном и том же месте. Всегда перемещать окно аппликатора на новую область после каждого лазерного импульса. Несоблюдение этого правила может привести к дискомфорту или нагреву кожи, которые могли бы привести к травмам.

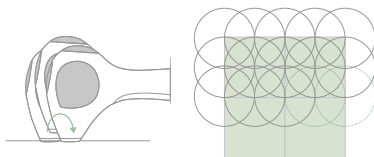

4. Продолжайте двигаться, пока вы ПОЛНОСТЬЮ не покроете район, который хотите обработать. С помощью счетчика импульсов лазера отслеживайте рекомендуемое количество импульсов, чтобы получить наилучшие результаты. Смотрите таблицу ниже, как руководство, сколько импульсов вам может понадобиться, чтобы покрыть каждую площадь на курс процедур. Эти счетчики импульсов и времени являются приблизительными - фактическая зона обработки и количество импульсов может изменяться.

РУКОВОДСТВО ПО КОЛИЧЕСТВУ ИМПУЛЬСОВ

ЧАСТЬ ТЕЛА	ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ	ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО МИНУТ
Подмышки	100 импульсов с одной стороны	4-5 минут на одну сторону
Зона бикини	200 импульсов с одной стороны	8-10 минут на одну сторону
Над верхней губой	25 импульсов	2-3 минуты
Верхняя часть ноги	600 импульсов с одной стороны	25-30 минут
Нижняя часть ноги	600 импульсов с одной стороны	25-30 минут

5. ВЫКЛЮЧИТЕ ЛАЗЕР, удерживая нажатой Кнопку питания. Повторяйте процедуры каждые 2 недели в течение 3-х месяцев или пока вы не достигнете желаемых результатов.

Всегда следуйте инструкциям и предупреждениям, предоставляемые в этой брошюре.

Примечание: При обработке больших площадей, как ноги и спина, возможно, потребуются более 600 импульсов для покрытия всей области с использованием аппликатора внахлестку. Если это действительно необходимо, пожалуйста, подзарядите TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X и продолжите применение устройства, пока вы не охватили нужную область обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вентилятор системы охлаждения может включаться и выключается во время применения устройства. Это нормально и не стоит об этом беспокоиться.

УХОД ЗА ЛАЗЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

TRIA LASER 4X не требует особого ухода, но мы рекомендуем держать его в чистоте, особенно окна аппликатора и датчика кожи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ

- Убедитесь, что TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X выключен, и отсоедините зарядное устройство от прибора и сетевой розетки.
- Для очистки TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X и зарядного устройства, смочите мягкую ткань водой с мягким мылом, и протрите окно аппликатора и корпус устройства. Будьте осторожны, чтобы не повредить аппликатор. Дайте высохнуть полностью перед зарядкой или включением прибора.
- Для очистки датчика кожи, расположенного у основания устройства, аккуратно протрите его с сухой тканью без ворса.

НЕ мыть зарядное устройство и прибор под водой. Если он намочнет, НЕ используйте TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X или зарядное устройство. Выполнение процедур мокрым лазерным устройством может привести к поражению электрическим током.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного периода времени, мы рекомендуем заряжать устройство через каждые 3 месяца для поддержания жизни батареи.

УТИЛИЗАЦИЯ

В устройстве TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X используются литиевые батареи, которые не могут быть заменены. Для переработки или утилизации прибора, пожалуйста, соблюдайте правила обработки мусора вашего места пребывания или обратитесь в службу поддержки клиентов для получения информации.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Используйте эту таблицу, чтобы помочь решить любые возникшие проблемы с TRIA HAIR REMOVAL LASER 4X

ВОПРОС	ВОЗМОЖНО, ЧТО	КАК УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ
Устройство не включается	Устройство не заряжено	Зарядите устройство, как показано в инструкции
При зарядке устройства индикатор зарядки на дисплее не пополняется	Ваше устройство не подключено должным образом.	Убедитесь, что ваш прибор надежно подключен к зарядному устройству и сетевой розетке
	Электрическая розетка в вашем доме не работает.	Попробуйте использовать другую розетку.
	Устройство заряжено и не требует дополнительной зарядки	Отключите зарядное устройство от прибора и розетки
Даже после зарядки устройства, на индикаторе все равно не показывается полную зарядку	Устройство не заряжено полностью	Зарядите устройство, как показано в инструкции
Когда я прикасаюсь аппликатором к коже, ничего не происходит	Ваше устройство заблокировано	Ваш прибор долго не использовался и заблокировался. Разблокируйте устройство, используя датчик кожи

ВОПРОС	ВОЗМОЖНО, ЧТО	КАК УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ
<p>Когда я прикасаюсь аппликатором к коже, ничего не происходит</p>	<p>Ваш прибор подключен к зарядному устройству</p>	<p>Устройство не будет работать, если оно подключено к зарядному устройству. Отключите зарядное устройство от прибора</p>
	<p>Окно аппликатора не в достаточно плотном контакте с кожей</p>	<p>Убедитесь, что аппликатор находится строго горизонтально вашей коже</p>
	<p>Участок кожи не достаточно плоский, имеет выпуклости</p>	<p>Попробуйте еще раз, потянув кожу. Если вы не сможете плотно прикоснуться к области применения, то устройство не будет работать.</p>
<p>Я не могу использовать устройство, т.к. на дисплее горит индикатор замка</p>	<p>Устройство заблокировано</p>	<p>Ваш прибор долго не использовался и заблокировался. Разблокируйте устройство, используя датчик кожи</p>
<p>Дисплей быстро мигает</p>	<p>Устройство не работает должным образом</p>	<p>Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов</p>
<p>Грязь или мусор попали на окно аппликатора</p>	<p>Устройство нуждается в очистке</p>	<p>Пожалуйста, посмотрите пункт инструкции, как ухаживать за прибором</p>

ВОПРОС	ВОЗМОЖНО, ЧТО	КАК УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ
<p>Я пытаюсь разблокировать устройство, но оно все еще заблокировано</p>	<p>Это может быть для вас не безопасно использовать лазер</p>	<p>Сравните тон вашей кожи с диаграммой тонов и обратитесь в службу поддержки клиентов</p>
	<p>Вы не достаточно корректно использовали датчик кожи</p>	<p>Попытайтесь еще раз, удерживая устройство горизонтально вашей коже.</p>
<p>Когда я перемещаю устройство, кажется, что проходит слишком много времени между импульсами</p>	<p>В комнате тепло. Устройство испускает импульс более медленными темпами в теплой окружающей среде по сравнению с прохладной.</p>	<p>Найдите прохладное место в помещении</p>
<p>Мое устройство работало должным образом, но потом он перестал работать, дисплей выключен и не включается даже при нажатии кнопки включения питания.</p>	<p>Требуется подзарядка устройства</p>	<p>Зарядите устройство, как показано в инструкции</p>
<p>Когда я пользуюсь устройством, я могу слышать шум вентилятора</p>	<p>Это нормально</p>	<p>Используйте далее</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Название: HAIR REMOVAL LASER 4X

Модель: HRL

Тип лазера: Диодный лазер

Класс лазерного излучения: 1

Длина волны выхода: 810 нм

ВЫХОД : 7-22 Дж / см²

Зарядное устройство ВХОД:

100-240 В ~, 50-60 Гц, 37 ВА

Зарядное устройство ВЫХОД:

5,0 В постоянного тока, 3,0 А / 2,3 А

ОЖИДАЕМЫЙ Срок службы: 3 года минимум

ФИЗИЧЕСКИЕ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

5 ° С до 30 ° С

Относительная влажность хранения:

Без конденсации 15-85%

Атмосферное давление:

700 гПа до 1060 гПа

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА:

От -20 ° С до 50 ° С

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ

ВЛАЖНОСТИ:

Без конденсации 0-93%

ВНИМАНИЕ!

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Товар сертифицирован по

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011



Условия гарантии

В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.

Гарантийная замена производится при наличии заполненного данного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в руководстве пользователя.

Гарантия на изделие не распространяется в случаях:

- механических повреждений;
- вскрытия пломб на изделии;
- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.

Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие (сменные картриджи и т.п.). Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт не исправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.

Гарантийный срок – 1 год.

Срок службы – 3 года.

Дата производства и наименование производителя указаны на упаковке.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь на наш сайт.

©Tria Beauty, Inc. <https://tria-beauty.ru>

Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. и подпись продавца:

М.П.